



GOCOZY EYE HEAT PATCHES

Indications

Use for warm compresses in cases of dry eyes, blepharitis, Meibomian Gland Dysfunction (MGD), chalazion, and sty.

Use for relaxation, relieving eye strain and fatigue caused by prolonged use of phone and computer screens, and for people with computer vision syndrome.

Important Safety and Use Information

PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS FOR USE AND ALL WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. TO REDUCE THE RISK OF BURNS AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE USE INSTRUCTIONS, WARNINGS, AND PRECAUTIONS.

Instructions for Use

1. Tear the pouch. The eye mask will warm up automatically upon opening of the pouch.
2. Place the eye mask over both eyes with eyelids gently closed.
3. Relax and feel comfortable with your eyes gently closed. For maximum effectiveness, wear the eye mask for at least 10 minutes.
4. Use once or twice a day for general application. For conditions like chalazion and sty, apply four times a day.

If you experience any discomfort, burning, swelling, rash, or other changes on your skin where the eye mask was worn:

STOP AND CALL YOUR DOCTOR IMMEDIATELY.

Precautions and Warnings

- Contact lenses/Eye surgery: remove contact lenses or other devices prior to use. If you have had recent cataract or other eye surgery, ask your eye care specialist before use.
- If you experience irritation, discomfort, or burning, remove the Gocozy eye heat patches immediately.
- For all consumers:
 - Gocozy is to be used with eyelids closed.
 - Do not use on unhealthy, numb, damaged, or broken skin.
 - Do not use after eyelid surgery or eye surgery without approval from your eye surgeon.
 - Do not microwave or attempt to reheat. Gocozy eye heat patches are for one-time use only. Discard appropriately after use.
 - Do not use if eyelids do not close normally.
- Additional important considerations: if you are concerned, consult your doctor as they are most familiar with your health.

Storage Conditions


Store at room temperature.
Keep out of reach of children and pets.

The owner of the medical device registration number:

Vimedlink Medical Co.LTD.,
Address: lot 10, Group 9, Viet Hung street, Viet Hung ward, Long Bien district, Hanoi, Vietnam.

Marketing and Distribution

GoMed Medical Co.LTD.,
Address: 352 Giai Phong street, Phuong Liet ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam.
<https://gomed.vn>

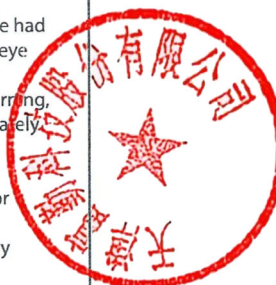

Yimengchuang 4

GOCOZY

Warm Therapy For Eyes

CHUỒM ẤM MẮT GOCOZY

Chỉ Định: Sử dụng để chườm ấm trong các trường hợp khô mắt, viêm bờ mi, tình trạng rối loạn chức năng tuyến Meibomius (MGD), mắt bị chắp, lệ.

Dùng để thư giãn, giảm mỏi mắt do sử dụng nhiều màn hình điện thoại, máy vi tính.

Lưu Ý Sử Dụng: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TẤT CẢ CÁC CẢNH BÁO TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ BỎNG VÀ CHẤN THƯƠNG, SẢN PHẨM NÀY PHẢI ĐƯỢC DÙNG ĐÚNG VỚI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC LƯU Ý.

CẢNH BÁO

- **Kính áp tròng/phẫu thuật mắt** - Tháo bỏ kính áp tròng hoặc các thiết bị trước khi dùng. Nếu gần đây bạn phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc các phẫu thuật khác, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Nếu bạn thấy khó chịu, bỏng rát hãy tháo ngay mặt nạ chườm mắt.

Cho tất cả mọi đối tượng sử dụng:

- Tránh các áp lực lên mặt nạ chườm một khi đã sử dụng.
- Nhắm mắt khi sử dụng.
- Không dùng trong trường hợp da mi mắt bị thương, trầy xước.

- Không dùng sau các trường hợp phẫu thuật mi mắt hoặc phẫu thuật mắt mà không có sự đồng ý của bác sĩ phẫu thuật.
- Không dùng lò vi sóng hoặc làm nóng lại. Chườm ấm Gocozy chỉ sử dụng một lần. Loại bỏ sản phẩm một cách thích hợp sau khi dùng.
- Không dùng trong trường hợp mi mắt không đóng được bình thường.
- **Thêm lưu ý quan trọng:** Nếu bạn còn băn khoăn, hãy nhờ sự tư vấn từ bác sĩ điều trị.

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Xé túi đựng để lấy mặt nạ chườm ấm mắt.
2. Nhắm mắt nhẹ và đeo mặt nạ chườm.
3. Thư giãn ở vị trí thoải mái, nhắm mắt nhẹ. Để đạt hiệu quả tối đa, chúng tôi đề nghị bạn nên đeo mặt nạ chườm trong ít nhất 10 phút mỗi lần.
4. Ngày sử dụng từ 1 đến 2 lần. Với tình trạng chắp lệ ngày sử dụng 4 lần.

Nếu bạn thấy khó chịu, bỏng rát, sưng tấy, ngứa hoặc thay đổi da nơi đeo mặt nạ chườm ấm; **NGỪNG SỬ DỤNG VÀ GỌI BÁC SĨ NGAY LẬP TỨC. Tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi.**

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK

ĐC: Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0888.462.788