

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA
BOZZA DEL / Proof date : N° 4	del 18 - 11 - 2020
PRODOTTO / Product : Hye MSC Lett EN-Viet	CODICE / Code : 912917/00
Cod. LAETUS IXXIIXXIIIX (2864)	G/MQ / g/smq : 50
FTO POSA STESA / Size flat : 135 x 220mm	FTO POSA PIEGATA / Size folded : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing : BIANCA / Top side :	☒ VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Colors : NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes :	C. Laetus: I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-I 0,65mm

912917/00



Sodium Hyaluronate 0.4%

Lubricating Eye Drops
10 ml preservative free bottle



Composition: Sodium Hyaluronate (0.4% w/v), sodium chloride, sodium citrate, citric acid monohydrate, water for injections.

What is it?

Hye is a sterile, preservative free eye drops solution of Sodium Hyaluronate.

Phosphate and preservative free.



How is it presented?

Hye is presented as an eye drops solution in a preservative free bottle of 10 ml.




When should it be used?

Hye is an ophthalmic solution of high-molecular weight Sodium Hyaluronate, obtained by biotechnological synthesis. Sodium Hyaluronate is a substance that originates mucomimetic solutions, with optimal lubricant properties due to the viscosity of the solutions that result in a moisturising effect and stabilization of the tear film.

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief. The product is preservative free and suitable for use with contact lenses.

How much to use?

1 drop in the eye one or more times daily, according to necessity.

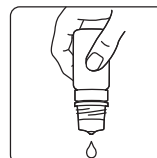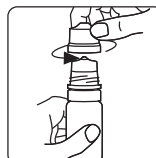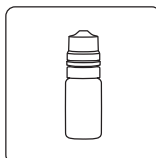

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the container is damaged.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- Do not use after the expiry date shown on the container.
- Do not touch the eye with the tip of the bottle.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes before administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened, each bottle can be used for up to 90 days.
- Carefully close the bottle after each use, ensuring the tip is free from any residual drops; if present, shake any off with a sharp wrist movement.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.
- To avoid the risk of bottle collapsing, do not deliver more than 30 consecutive drops.

Manufacturer: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121, Pisa, Italy

Import and distribution: GoMed Medical Co., LTD

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Date of last revision of the text: April 2020



Dispose of properly after use.





Natri Hyaluronate 0.4%

Dung dịch bôi trơn mắt
Lọ 10 ml không chất bảo quản

Thành phần: Natri Hyaluronate 0.4%, NaCl, Natri citrate, citric acid monohydrate, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế và hoạt chất

Hye là dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn, không chất bảo quản chứa Natri Hyaluronate.

Không chứa phosphate và không chất bảo quản

Dạng trình bày

Hye là dạng bào chế nhỏ mắt được đựng trong lọ 10 ml.

Chỉ định


Hye là một dung dịch nhỏ mắt chứa hợp chất cao phân tử Natri Hyaluronate, được tạo ra bởi công nghệ tổng hợp sinh học. Natri Hyaluronate là một chất tạo ra các dung dịch có đặc tính nhầy, với các tính chất bôi trơn tối ưu nhờ có tác dụng làm ẩm và ổn định màng phim nước mắt.

Tính chất bôi trơn, làm ẩm và bảo vệ của Natri Hyaluronate giúp làm dịu sự khó chịu, cảm giác khô, nóng và dị vật gây ra bởi các tác động của môi trường (gió, ánh nắng mặt trời, khói bụi, không khí khô), mỏi mắt (do ánh sáng quá mức và thời gian dài sử dụng các thiết bị điện tử) hoặc các tác động cơ học (sử dụng kính áp tròng, sau phẫu thuật mắt), giúp cung cấp tác dụng kéo dài.

Sản phẩm không chứa chất bảo quản và tương thích với việc sử dụng kính áp tròng.

Liều dùng

Một giọt vào mỗi mắt hoặc dùng nhiều lần trong ngày tùy thuộc vào nhu cầu.

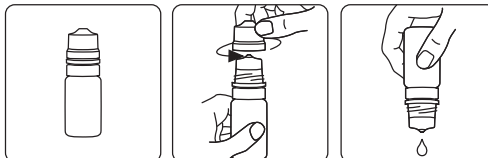

Thận trọng và cảnh báo

- Sản phẩm chỉ dùng để nhỏ mắt.
- Không sử dụng trong trường hợp lọ đựng bị hư hại.
- Không dùng trong trường hợp không tương thích với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Không chạm đầu lọ vào mắt.
- Sau khi sử dụng, trong một số ít trường hợp, có một cảm giác mờ nhẹ tạm thời do tính chất nhầy của dung dịch; do vậy nên chờ đến lúc hết cảm giác mờ để thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải có tầm nhìn rõ ràng.
- Chờ ít nhất 10 đến 15 phút trước khi sử dụng bất kỳ chế phẩm nhỏ mắt nào khác.
- Mỗi lọ được sử dụng tối đa tới 90 ngày từ khi mở nắp lần đầu.
- Đóng nắp cẩn thận sau khi dùng, đảm bảo đầu lọ không còn giọt nước lưu lại trước khi đóng nắp; nếu còn hãy lắc để giọt nước rơi ra trước khi đóng.
- Để xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
- Bảo quản dưới 25°C.
- Không được uống.
- Để tránh lọ bị hư hại, không nhỏ liên tục quá 30 giọt trong một lần bóp.

Nhà sản xuất: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italy

Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Y Tế GoMed

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Hiệu đính nội dung lần cuối: 04-2020



Loại bỏ sản phẩm một cách
phù hợp sau khi sử dụng.

