

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA
BOZZA DEL / Proof date : N° 3	del 21 - 10 - 2020
PRODOTTO / Product : Hye Mono Lett EN-Viet	CODICE / Code : 912918/00
Cod. LAETUS IXXIIXXI (2865)	G/MQ / g/smq : 50
FTO POSA STESA / Size flat : 135 x 220mm	FTO POSA PIEGATA / Size folden : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing : BIANCA / Top side :	☒ VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Colors : NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes :	C. Laetus: I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-H 0,65mm

912918/00

Hye mono

FARMIGEA

Sodium Hyaluronate 0.4%

Moisturizing, lubricant ophthalmic solution

20 preservative free reclosable mini-containers of 0.5 ml

Composition: Sodium Hyaluronate (0.4% w/v), sodium chloride, sodium citrate, citric acid monohydrate, water for injections.

What is it?

Hye mono is a sterile ophthalmic solution containing Sodium Hyaluronate.
Phosphate and preservative free.

How is it presented?

Hye mono is presented as an eye drops solution in 20 reclosable vials of 0.5 ml.

When should it be used?


Hye mono is an ophthalmic solution of high-molecular weight Sodium Hyaluronate, obtained by biotechnological synthesis. Sodium Hyaluronate is a substance that originates mucomimetic solutions, with optimal lubricant properties due to the viscosity of the solutions that result in a moisturising effect and stabilization of the tear film.

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief.

How and how much should it be used?

- Open the aluminum bag and separate one mini-container from the strip of mini-containers;
- Open it by turning and pulling the cap;
- Put one drop in the eye by squeezing gently the body of the mini-container, one or more times daily, according to necessity.

Hye mono is filled in re-closable vials and the remaining product can be used up to 12 hours. **Hye mono** is compatible with contact lenses and it is not necessary to remove them before the ophthalmic solution is applied.

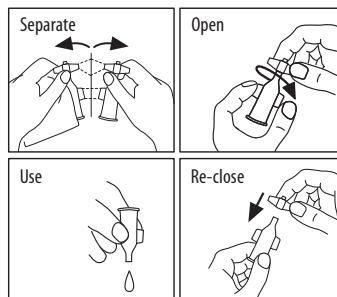

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the mini-container is damaged.
- Do not use in case of known incompatibility to any of the ingredients of the preparation.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the mini-container.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes before administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened, each vial can be used for up to 12 hours.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.

Manufacturer: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italy

Import and distribution: GoMed Medical Co., LTD

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Date of last revision of the text: April 2020



Dispose of properly after use.

STERILE A

CE 0546



Natri Hyaluronate 0.4%

Dung dịch làm ẩm và bôi trơn

20 tép, mỗi tép 0.5ml không chứa chất bảo quản

Thành phần: Natri Hyaluronate 0.4%, NaCl, Natri citrate, citric acid monohydrate, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế và hoạt chất

Hye mono là dung dịch nhỏ mắt chứa Natri Hyaluronate.

Không chứa phosphate và không chất bảo quản

Dạng trình bày

Hye mono là dạng bào chế nhỏ mắt được đựng trong 20 tép, mỗi tép 0.5ml

Chỉ định

Hye mono là một dung dịch nhỏ mắt chứa hợp chất cao phân tử Natri Hyaluronate, được tạo ra bởi công nghệ tổng hợp sinh học. Natri Hyaluronate là một chất tạo ra các dung dịch có đặc tính nhầy, với các tính chất bôi trơn tối ưu có tác dụng làm ẩm và ổn định màng phim nước mắt.

Tính chất bôi trơn, làm ẩm và bảo vệ của Natri Hyaluronate giúp làm dịu sự khó chịu, cảm giác khô, nóng và dị vật gây ra bởi các tác động của môi trường (gió, ánh nắng mặt trời, khói bụi, không khí khô), mỏi mắt (do ánh sáng quá mức và thời gian dài sử dụng các thiết bị điện tử) hoặc các tác động cơ học (sử dụng kính áp tròng, sau phẫu thuật mắt), giúp cung cấp tác dụng kéo dài.


Cách dùng

- Xé túi nhôm và lấy ra một tép sản phẩm;
- Mở tép bằng cách vận và kéo nắp ra;
- Nhỏ một giọt vào mắt bằng cách bóp nhẹ vào thân tép đựng, mỗi ngày dùng một lần hoặc nhiều hơn tùy theo nhu cầu sử dụng.

Hye mono được đựng trong tép có thể đóng lại và phần còn lại của sản phẩm có thể được dùng tối đa trong vòng 12 tiếng. Hye mono tương thích với kính áp tròng và không cần phải tháo kính áp tròng trước khi sử dụng.

Thận trọng và cảnh báo

- Sản phẩm chỉ dùng để nhỏ mắt.
- Không sử dụng trong trường hợp tép đựng bị hư hại.
- Không dùng trong trường hợp không tương thích với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Không chạm đầu tép vào mắt.
- Sau khi sử dụng, trong một số ít trường hợp, có một cảm giác mờ nhẹ tạm thời do tính chất nhầy của dung dịch; do vậy nên chờ đến lúc hết cảm giác mờ để thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải có tầm nhìn rõ ràng.
- Chờ ít nhất 10 đến 15 phút trước khi sử dụng bất kỳ chế phẩm nhỏ mắt nào khác.
- Mỗi tép được sử dụng tối đa tới 12 tiếng sau khi mở.
- Để xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
- Bảo quản dưới 25°C.
- Không được uống.

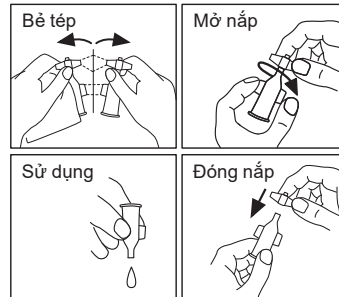

Nhà sản xuất: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italy

Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Y Tế GoMed

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Hiệu đính nội dung lần cuối: 04-2020



Loại bỏ sản phẩm một cách phù hợp sau khi sử dụng.

